


AccuFab-L4D

Impresora 3D de gran formato **Shining 3D**

► *Conectando el futuro*

Elevada fluidez y grado de detalle para la industria dental

AccuFab-L4D brinda un resultado de impresión de alta fidelidad y proporciona un eficiente flujo de trabajo desde el escaneo intraoral hasta la impresión 3D.

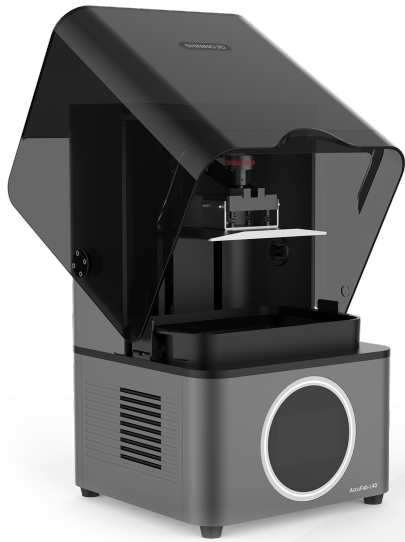

ESCÁNER INTRAORAL AORALSCAN 3

Ecosistema digital integrado como una herramienta clave en la industria dental.

ACCUDESIGN

Software de creación de modelos con actualización gratuita incluido con la impresora.

NUBE DENTAL

La nube de SHINING 3D permite la transmisión de datos, convirtiéndose así en una potente herramienta de comunicación entre clínicas y laboratorios dentales.

► *Elevada exactitud*

Exactitud

La exactitud de impresión alcanza hasta $\pm 50 \mu\text{m}$ de forma constante.

Uniformidad

La uniformidad de luminancia alcanza hasta un 90%.

Más allá de los límites

Brinda no solo la posibilidad de obtener geometrías más pequeñas que un píxel, sino también un acabado superficial superior.



► *Gran tamaño de impresión, Resolución 4K*



El tamaño de impresión de 192 * 120 mm y la resolución 4K satisfacen las exigencias de los usuarios en cuanto a eficiencia y detalles.


► Rendimiento fiable

Óptica de grado industrial

Módulo óptico de alta calidad con componentes de larga duración.

Resistente y fiable


Las cinco millones de capas de AccuFab-L4D probadas en condiciones reales en clínicas dentales proporcionan una elevada fiabilidad para las exigencias actuales.

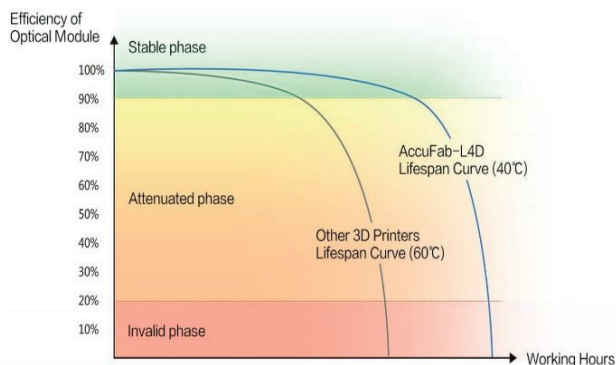

Sistema de refrigeración de distrito

El DCS (sistema de refrigeración de distrito) mantiene la temperatura de la pantalla de trabajo por debajo de los 40°C, al tiempo que extiende la vida útil de la impresora 3D de manera notable.

► Múltiples opciones de materiales

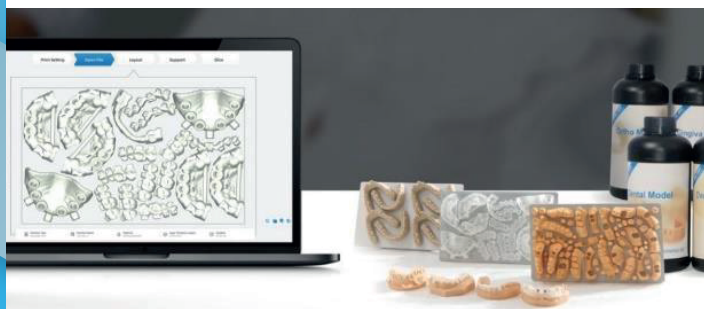

SHINING DENT

Shining Dent cubre una amplia gama de materiales para aplicaciones de impresión dental 3D, incluye modelo dental, modelo ortopédico, guía quirúrgica, cera calcinable y mascarilla gingival.

Material de terceros certificado

Shining 3D se asocia con marcas líderes en la industria en material dental, proporcionando mayor flexibilidad y más posibilidades.

► Software Dental Profesional

Conecta y reproduce

El software interactivo guiado proporciona una sencilla curva de aprendizaje.

Actualizaciones gratuitas

Actualización automática de paquetes de software y materiales.

Asistente de calibración de precisión

Guía paso a paso para una calibración de precisión.

